


定量免疫法糞便潛血檢驗採檢說明


正確的採便方法

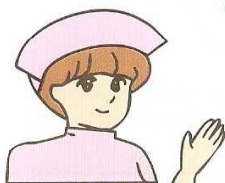

為了能進行正確的檢查請務必閱讀以下說明：

- 為了獲得正確的檢查結果，採便後請放置於陰涼避光環境中儘快送檢。
- 採便後若無法立即送檢，應避光放置 2 ~ 8 °C 冷藏。勿冷凍。
- 遇痔瘡出血或女性生理期請暫勿採檢。

1

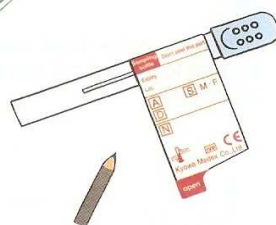

請寫下：

- A : 年齡
S : 性別 男生(M)、女生(F)
D : 採樣日期
N : 名字

2

洋式

請反向使用



衛生紙


請務必先鋪好衛生紙，避免採便時，檢體受污染。

和式



衛生紙

3

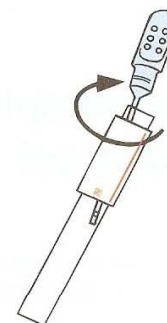


輕輕迴拉起採便棒，
避免漏出保存液。

※若糞便檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果。

4


來回左右刮取糞便表面。

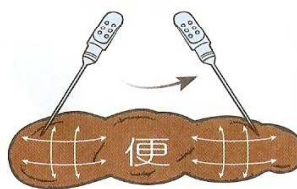

以採便棒尖端刮取糞便4次，
使糞便填滿凹槽即可。


5

※適量的填滿溝槽
大約芝麻粒大小即可！

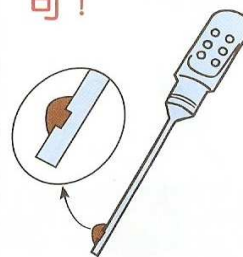

6

將採便棒推入採便容器內，請不要再開啓，以免漏液或微生物入侵影響。

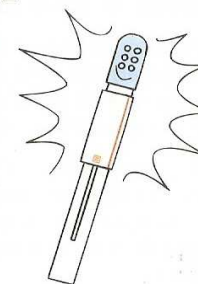

Mar. 2015

資料來源：廠商提供